

レセプトチェッカーLS クラウド版

ORCA接続操作マニュアル

Version 3.0.0.1

2024 年 2 月 17 日

DX CARE株式会社

順序

CONTENTS

.....

1. インストール編 3

.....

2. 操作編 13

.....

3. その他編 18

Contents

1. インストール編

- 1.1 ソフトウェアのダウンロード
- 1.2 インストール
- 1.3 ソフトウェアの起動

1. インストール編

1.1 ソフトウェアのダウンロード

レセプトチェッカーLS のサイト（<https://receipt-checker.innorules-ai.com/>）のトップページで

「製品情報」→「ダウンロード」をクリックして、「ダウンロード」ページを開きます。


「アップデート情報」をクリックして、「ORCA 接続ソフトのインストーラ」（RC_LS_Client.zip）をダウンロードします。



1. インストール編

1.2 インストール

ダウンロードしたファイルを解凍します。

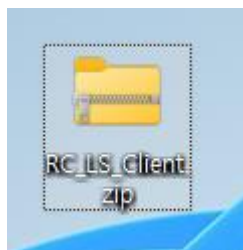



解凍するといくつかのファイルが出来ますので、

PCで初めてインストールする場合は

「**setup.exe**」をダブルクリックするか、または右クリックして「開く」を選択して実行します。


コンピュータに既にインストールされている場合は

「**Reinstall.bat**」をダブルクリックするか、または右クリックして「開く」を選択して実行します。

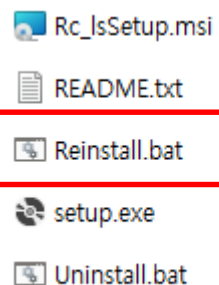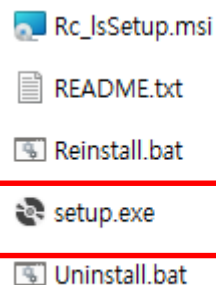


1. インストール編

下の画面が表示されたら「詳細情報」をクリックします。

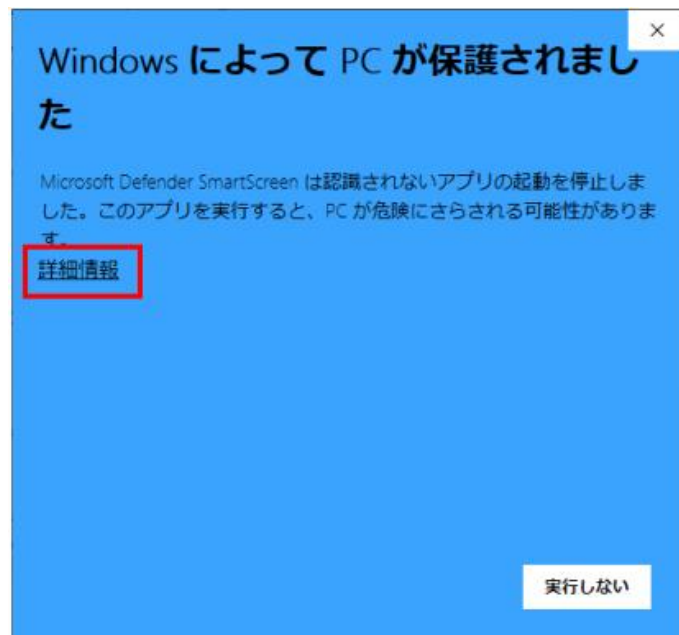


「実行」をクリックします。

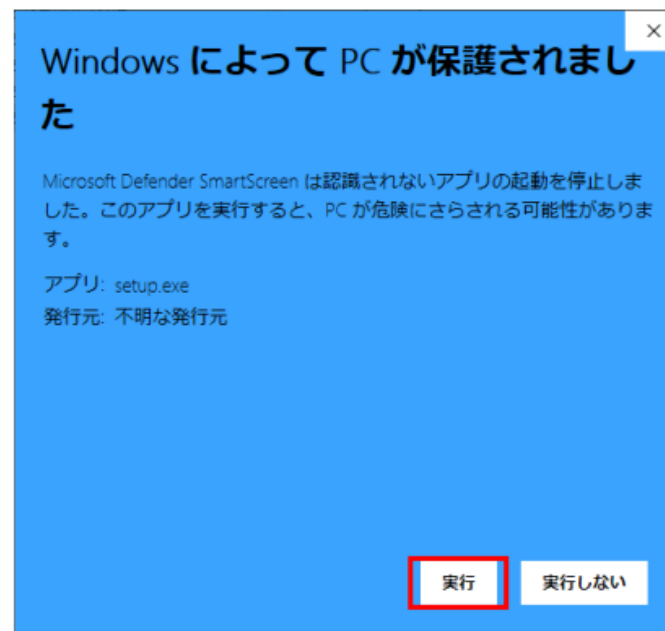


1. インストール編

セットアップウィザードの画面が表示され、インストールが始まります。「次へ」をクリックします。

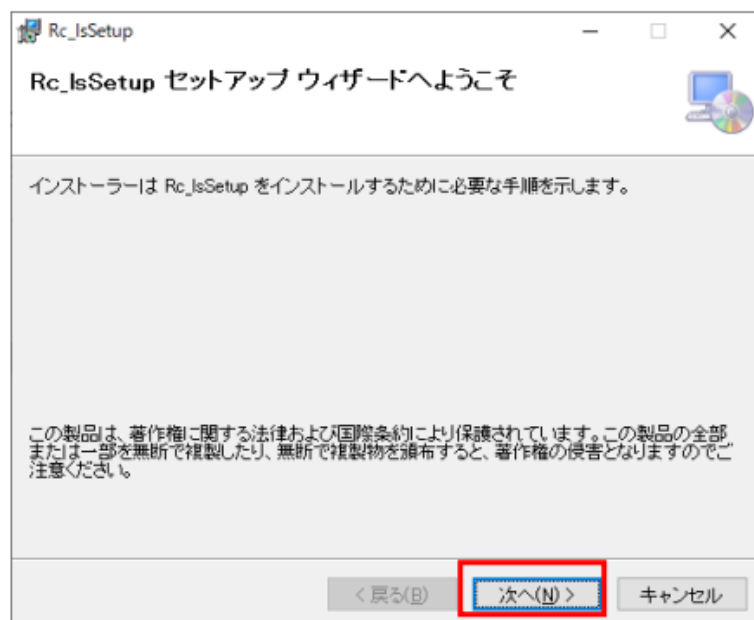


インストールフォルダと「ユーザー」の選択をします。表示されているフォルダで問題ない場合や分からない場合は「次へ」をクリックします。

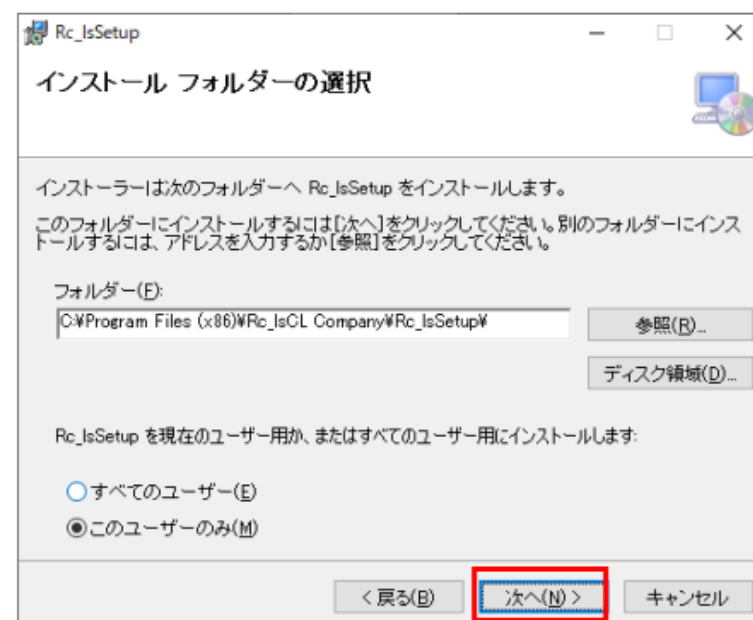


1. インストール編

「インストールの確認」画面になりますので、
「次へ」をクリックします。

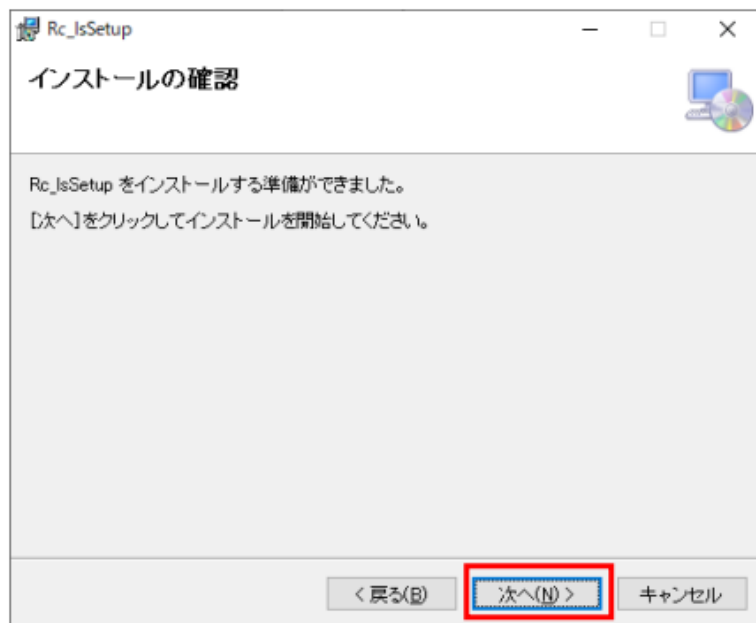


ユーザーアカウント制御の確認画面が出たら
「はい」をクリックします。

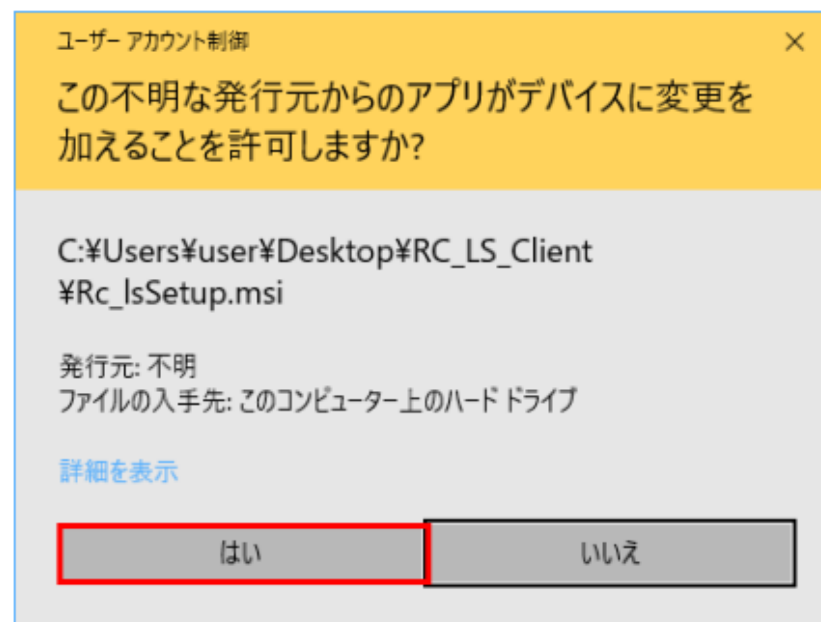


1. インストール編

インストールが開始します。

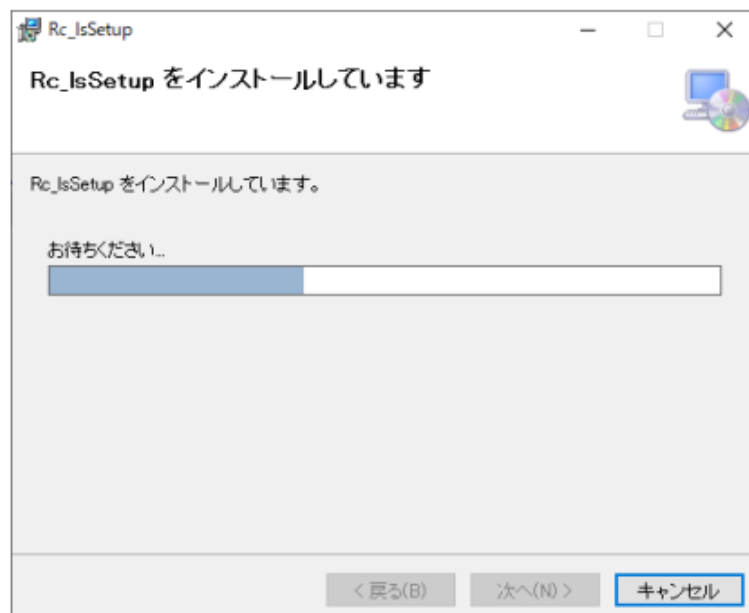

「インストールが完了しました」と表示されたら
インストール完了ですので、「閉じる」をクリックします。

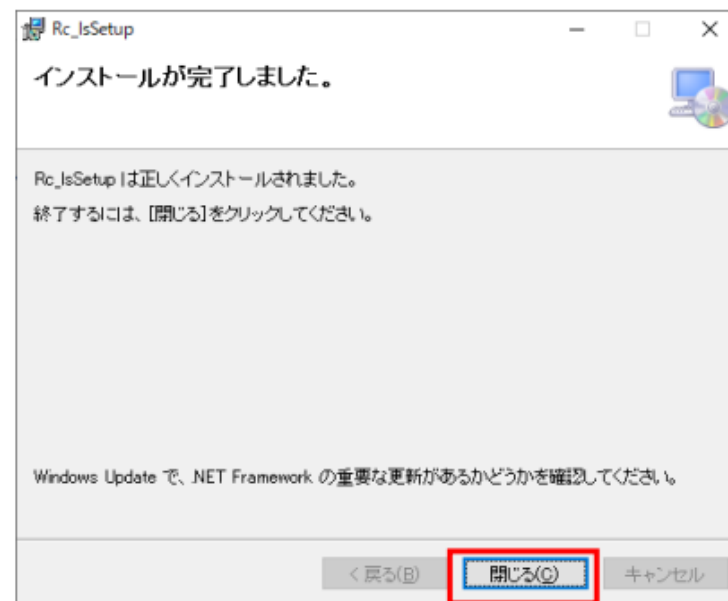

1. インストール編

1.3 ソフトウェアの起動

Rc_IsCL のアイコンをダブルクリックするか、右クリックして「開く」を選択します。




ソフトウェアが起動します。

接続/環境設定/Upgradeタブがあります。

1. 「接続」タブ

接続タブでは、ユーザーIDとパスワードを入力します。

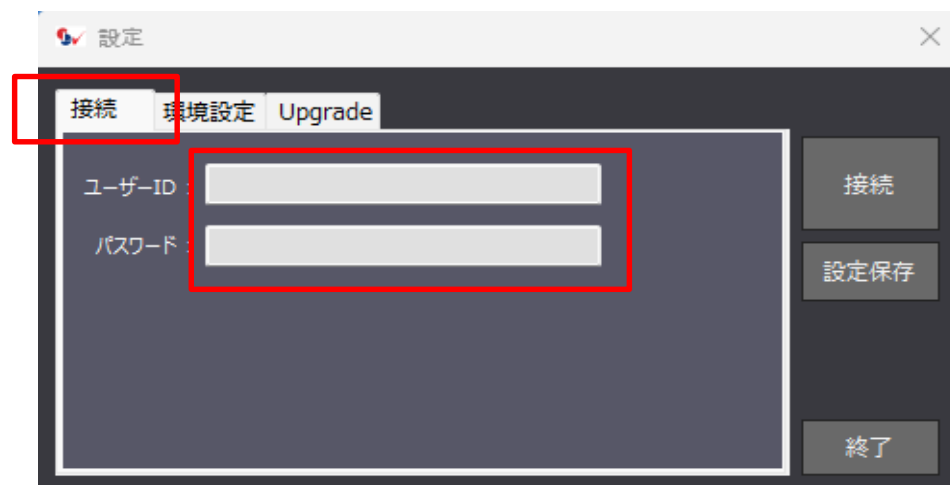

1. インストール編

2. 「環境設定」タブ

① ORCA（日医標準レセプトソフト）の設定

「ORCA 環境」タブをクリックして切り替えます。


「サーバーIP」に ORCA の IP アドレス、

「DB User」に ORCA データベースに接続するためのユーザーID、

「DB Pass」に同パスワード、

DB Name に同データベース名をそれぞれ入力します。


※分からない場合はORCA サポート事業所にお問い合わせください。

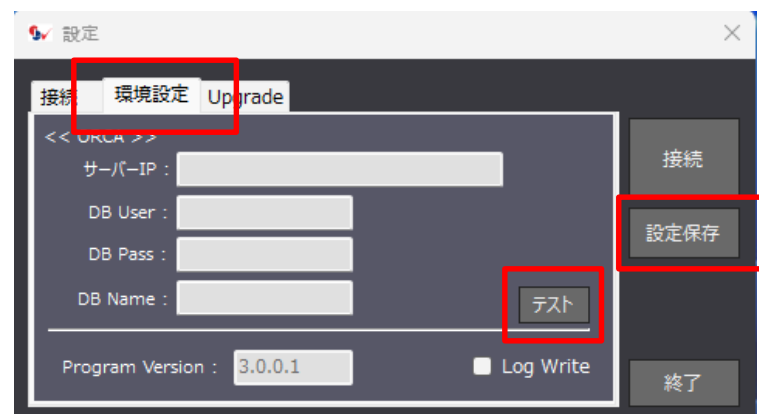

② 接続テスト

①で入力した内容で「テスト」をクリックして接続できるか確認します。

「ORCA 接続が完了しました」と表示されたらテスト成功です。

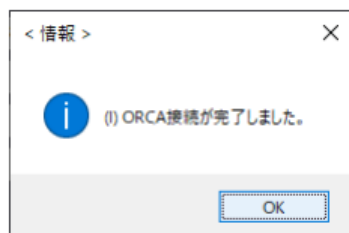


③ 設定保存

「設定保存」をクリックして保存します。次回起動時には「ORCA 環境」が保存されています。

1. インストール編

3. 「Upgrade」タブ

インストールバージョンが最新バージョンでない場合は、以下のように画面に表示されます。

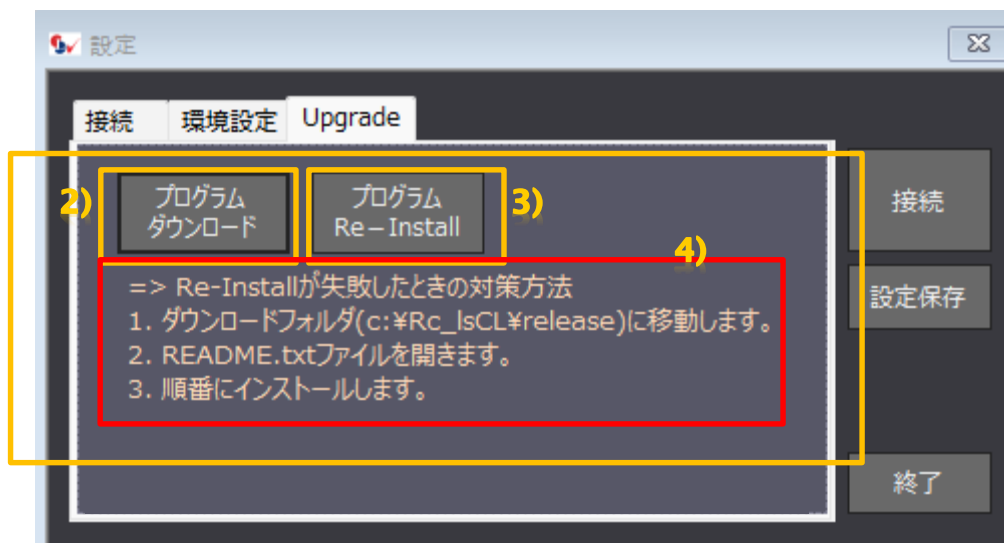

※ インストールバージョンが最新バージョンであれば何も表示されません。

- 1) 現在のプログラムが新しいプログラムよりもバージョンが低い場合、プログラムのダウンロードとプログラムの Re-Installボタンが表示されます。
- 2) 新規プログラムをダウンロードします。
- 3) 現在のプログラムを削除し、新規プログラムを再インストールします。
- 4) プログラム Re-Installが失敗した場合は、順番に進みます。

Contents

2. 操作編

- 2.1 レセプトの準備
- 2.2 操作方法
- 2.3 ログ情報

2. 操作編


2.1 レセプトの準備

ORCA（日医標準レセプトソフト）の電子レセプトを取り込むには、ORCA でレセプト電算データが作成されていることが前提となります。ORCA の「業務メニュー」→「42 明細書作成」において、チェックする当月分のレセプトが作成されているか確認後、操作を行ってください。

※ レセプト電算データが作成されていない場合は「データなし」と判断されます。

2.2 操作方法

① ORCA サーバーへの接続

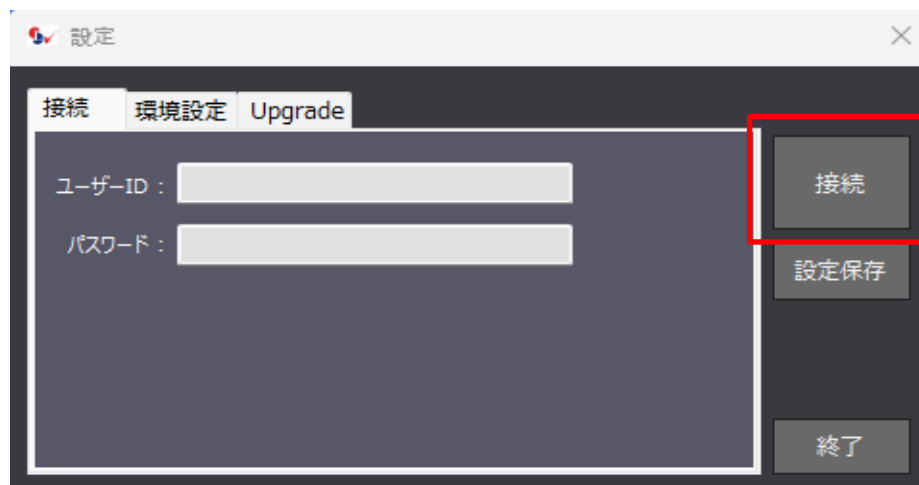

「環境設定」タブのテストがそれぞれ問題なければ、ユーザーIDとパスワードを入力します。そして「接続」ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。下の画面に切り替わるので診療年月を入力し、「社保」、「国保」、「後期高齢者」のいずれかにチェックを入れて「送信」をクリックします。

2. 操作編

下の画面で診療年月を入力し、「社保」、「国保」、「後期高齢者」のいずれかにチェックを入れて「送信」をクリックします。

※ 送信するデータを自動チェックまで実行したい場合は、自動チェックをチェックします。

診療年月： 2020 年 10 月

☒ 社保 ☐ 国保 ☐ 後期高齢者

☒ 自動点検

送信 クリア 終了

送信する前にorcal内でデータを作成してください。

3-サーバーにレセ電データを送信します。
2-レセ電データ作成に成功しました。(レセプト=1)
1-レセ電データを作成します。(C:\Rc_lsCL\Data\202010S.UKE)
start

「送信」が完了すると下図のメッセージが表示されます。



2. 操作編

ORCA の当該の電子レセプトが作成され、レセプトチェッカーLS サーバーに送信されます。


送信されると自動的にサーバーに取り込まれます。

2分から7分経過後、レセプトチェッカーLS サーバーで点検を行います。

画面上にも下段にログが表示されています。

「点検 Call」をクリックするとブラウザが起動し「レセプトチェッカーLS」のログイン画面が表示されます。

「クリア」をクリックすると下段のログが消去されます。

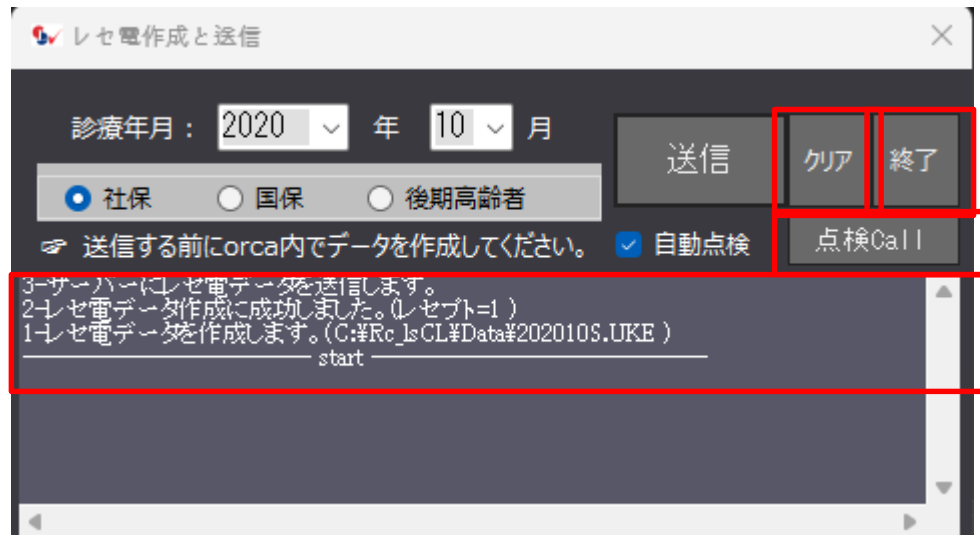

②ソフトウェアの終了

「終了」をクリックすると終了します。

2. 操作編

2.3 ログ情報

ソフトウェアをインストールするとインストール先（ローカルディスク C またはユーザー指定先）に

Rc_IsCL というフォルダが作成されます。

このフォルダ内に Data と Log フォルダが作成され、Data フォルダには電子レセプトファイル、Log フォルダにはログファイルが作成されます。

Data フォルダ内の電子レセプトファイルでサーバーにアップされた電子レセプトの内容が確認できます。

また、ログファイルは通常使用することはありませんが、動作が不安定な場合、原因究明のためサポートから Log ファイルの確認をお願いすることがあります。

Contents

3. その他編

- 3.1 ソフトウェアの手動更新
- 3.2 ソフトウェアのアンインストール

3. その他

3.1 ソフトウェアの手動更新

ソフトウェアの現在のバージョンは 3.0.0.1 ですが、最新版が提供されるとバージョンがアップします。
ソフトウェアの更新（バージョンアップ）を行うには、アンインストールした後、再度インストールします。

①アンインストール方法は「ソフトウェアのアンインストール」を参照してください。

②最新版のインストーラ（RC_LS_Client.zip）をダウンロードします。

③「setup.exe」を実行します。


※最初の設定は不要です。

詳しくは、第 1 章のインストールをご確認ください。


3. その他

3.2 ソフトウェアのアンインストール


インストーラの一覧から Uninstall.bat を実行します。

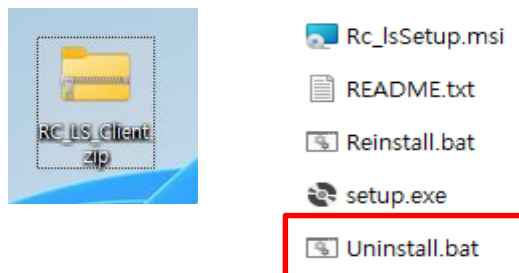

Windows インストーラーが表示されますので、「はい」をクリックします。

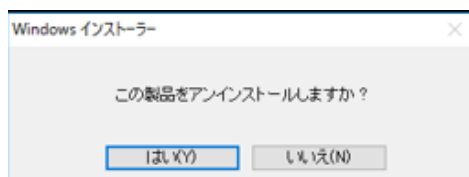


ユーザーアカウント制御の確認画面が出たら「はい」をクリックします。

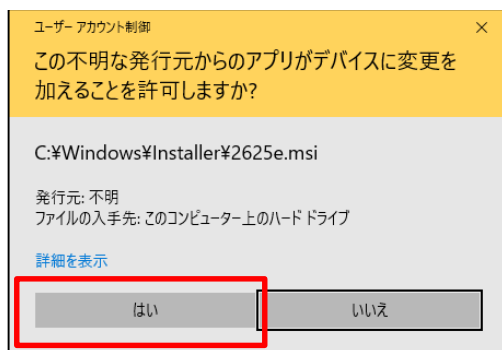


3. その他

ユーザーアカウント制御の確認画面が出たら「はい」をクリックします。

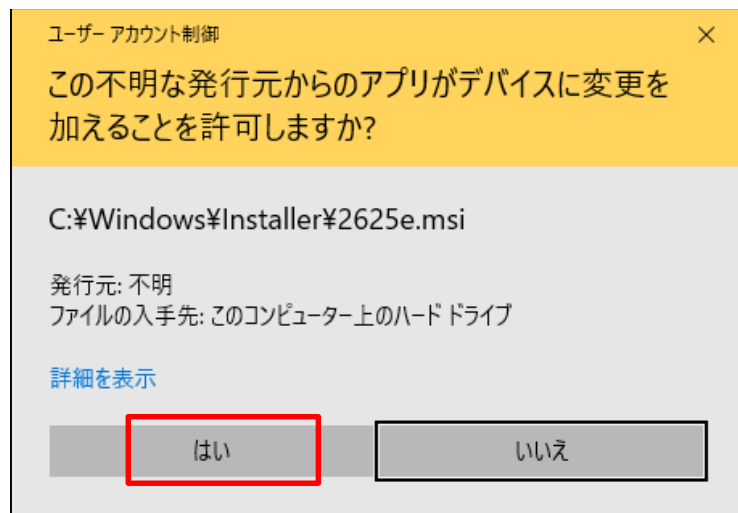

アンインストールの進行メッセージが終了したらアンインストールは完了です。

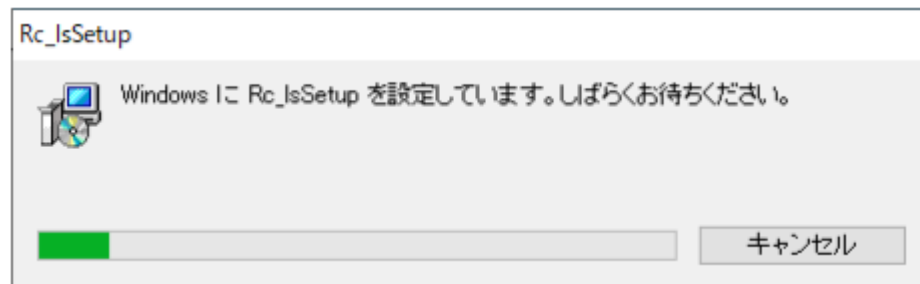

注：レセプトチェッカーによる判定の結果生じた返戻、減点、査定につきましては
責任を負いかねますのでご了承ください。

レセプトチェッカーLS クラウド版 ーORCA接続操作マニュアルー

2024 年 2月 17日

■ レセプトチェッカーLS


- ☐ 開発・販売 DX CARE株式会社
- ☐ 医学監修 長崎県保険医協会

■ お問い合わせ

DXCare DX CARE株式会社

サポートデスク

〒169-0072 東京都新宿区大久保2丁目2-12 VORT東新宿201

 0120-734-984 FAX : 03-6821-020

E-mail : rc-dev@dx-care.com

URL : <https://dx-care.com/>